

計量器プリンター 入力装置 mpr 3-45

新発売

入力ミス防止
作業効率向上


計量値はバーコード出力
PC入力はバーコードスキャン




国内外の計量機器に取付可能
(メトラー・ザウトリウス等)
*計量機器は付属しません



入力装置

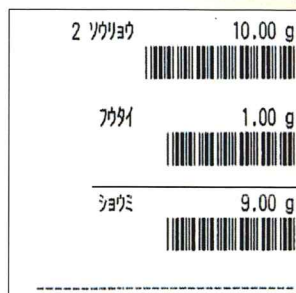

バーコードプリンター

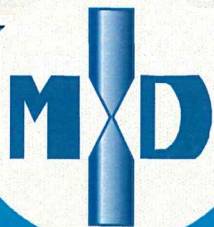

マイクロ電子株式会社
micro-denshi co., ltd.

〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田1-21-23
TEL 044-945-2521 FAX 044-945-1648
URL <http://www.micro-spot.co.jp>
E-mail ask@micro-spot.co.jp



計量器プリンター mpr 3-45 仕様

本装置mpr 3-45は計量機器データーの数値をプリンターに印字出力する装置です
出力は、風袋等をキー入力し、日付・時刻・正味重量が印字され、最後に各合計を印字出力します
風袋計算モードは、ご希望の出力が選択出来るようにご用意しております
特殊な計量方法にもご相談をたまわります
入力ミス防止、作業効率向上に是非ご検討下さい



計量機器との接続 RS-232C

プリンター用紙幅 58mm

重量をPC入力する場合はバーコードを印刷してスキャナーで読み取る事が可能です

《装置の大きさ》

入力装置 横150mm×縦250mm×高さ 60mm

バーコードプリンター 横140mm×縦180mm×高さ120mm

風袋計算モード 印刷事例

操作方法

- ①計量器又は手入力でデーターを入力
- ②風袋重量を入力
- ③正味重量が表示され印刷する

YYYY/MM/DD	12:34:56
1 ソウリョウ	100.00 g
フウタイ	1.00 g
ショウミ	99.00 g

操作方法

- ①計量器又は手入力で複数回データーを入力
- ②合計を印刷する

YYYY/MM/DD	12:34:56
1	3,798.46 g
2	3,798.55 g
3	3,766.52 g
4	3,766.25 g
5	3,722.56 g
6	3,689.25 g
7	3,699.25 g
8	3,700.25 g
9	3,429.28 g
10	3,688.96 g
ゴウケイ	37,059.33 g

操作方法

- ①1回目計量器又は手入力で総量入力
- ②1回目風袋重量を入力
- ③1回目の正味が表示され、印刷する
- ④2回目からは1回目と同様に複数回計量を行う
- ⑤それぞれの総合計を印刷する

YYYY/MM/DD	12:34:56
1 ソウリョウ	3,799.11 g
フウタイ	2,002.55 g
ショウミ	1,796.56 g
2 ソウリョウ	3,799.11 g
フウタイ	2,000.00 g
ショウミ	1,799.11 g
ソウリョウケイ	7,598.22 g
フウタイケイ	4,002.55 g
ショウミケイ	3,595.67 g

操作方法

- ①計量器又は手入力で総量入力
- ②風袋重量を複数回入力
- ③正味重量が表示され印刷する

YYYY/MM/DD	12:34:56
1 ソウリョウ	37,980.46 g
フウタイ	78.23 g
フウタイ	955.00 g
フウタイ	1,189.00 g
フウタイ	1,589.00 g
フウタイ	220.00 g
フウタイ	891.25 g
フウタイ	22.56 g
フウタイ	852.25 g
フウタイ	182.27 g
ショウミ	32,000.90 g